



IMPLANTY


IMPLANT KULKOWY

Implant Champions®-Implant kulkowy jest implantem jednoczęściowym przeznaczonym do implantacji na poziomie kości. Dostępne są implanty o średnicy 2,5/3,0/4,0 mm oraz długości 8/10/12/14/16/18 mm. Biorąc pod uwagę szeroki zakres wskazań, implant nadaje się nie tylko do implantacji w już wyleczonej kości (implantacja późna) lecz także do implantacji opóźnionej (6 – 8 tygodni po ekstrakcji zęba), a w odpowiednich warunkach do implantacji natychmiastowej (zaraz po ekstrakcji zęba).

Implanty kulkowe mogą być stosowane w różnej jakości kości szczęki i żuchwy (D1-D4) do mocowania protez ruchomych. W szczęce co najmniej 3 pro kwadrant, w żuchwie co najmniej 2 pro kwadrant.

Proszę zwrócić uwagę na wskazane ograniczenia w instrukcji.

Materiał: tytan 4 stopnia

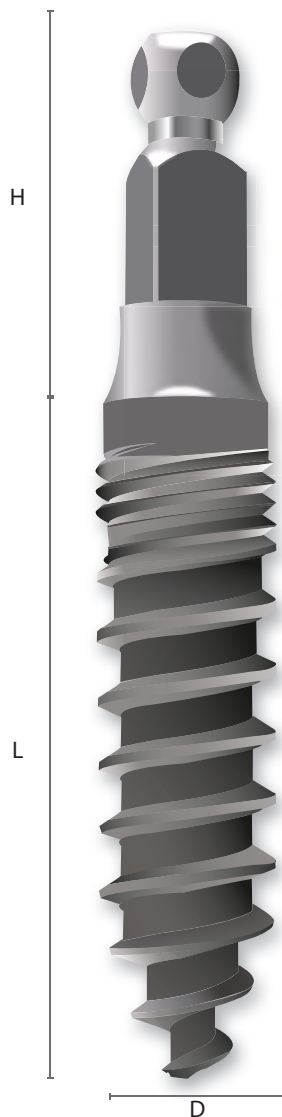

Średnica	Długość	Wysokość	Nr. artykułu	Rodzaj
2,5 mm	10 mm	6,3 mm	1900	
	12 mm	6,3 mm	2015	
	14 mm	6,3 mm	2035	
	16 mm	6,3 mm	2055	
3,0 mm	8 mm	6,8 mm	1890	
	10 mm	6,8 mm	1905	
	12 mm	6,8 mm	2016	
	14 mm	6,8 mm	2040	
	16 mm	6,8 mm	2060	
	18 mm	6,8 mm	2080	
4,0 mm	8 mm	7,1 mm	1895	
	10 mm	7,1 mm	2005	
	12 mm	7,1 mm	2025	
	14 mm	7,1 mm	2050	
	16 mm	7,1 mm	2070	
	18 mm	7,1 mm	2090	

